

PDE™ MODULAR NEUROMUSCULAR SPRING SYSTEM

Maak weer maatwerk met betere resultaten voor uw patiënten

Modulair, aanpasbaar en eenvoudig in gebruik! Voor volwassenen en kinderen.

Verkrijgbaar in
5 categorieën
stijfheden

De veren zijn een oplossing voor

- ✓ Elke patiënt die baat heeft bij een op maat gemaakte EVO, waarbij het ontlasten van het gewicht niet het hoofddoel is;
- ✓ Patiënten met een matige spierzwakte die hulp kunnen gebruiken bij dorsale en plantaire flexie.



Speciale Fitkits voor keuzevrijheid

U weet als geen ander wat het best bij uw patiënt past.

U maakt zelf het ontwerp; een op maat gemaakte brace van een gipsmodel past altijd het best. Wij leveren losse veren en veren in een speciale kit, zodat u de 5 meest gebruikte maten en stijfheden van veren bij de hand hebt tijdens de fitting.

Er is een Fitkit voor volwassenen en voor kinderen.



Vijf categorieën veren in de Fitkits voor volwassenen & kinderen

U kunt de Fitkit gebruiken tijdens de pasfase. Elke kit is inclusief de 5 meest gebruikte veren in 5 verschillende stijfheden. U kunt op het moment dat de brace wordt getest heel eenvoudig met 4 schroeven een veer van een andere categorie inpassen.



Twee soorten ankers

In de Fitkits vindt u twee soorten ankers. Er zijn gietankers en ankers voor thermoplastisch materiaal. Voor volwassenen en kinderen zijn verschillende ankers beschikbaar.



**Modulair
Aanpasbaar
Dynamisch
Eenvoudig in gebruik**



De brace verandert eenvoudig mee

De veren zijn verkrijgbaar in verschillende stijfheden en lengtes. Zo zijn er veren van 175- 225- en 250 mm.

- ✓ Verander eenvoudig de PDE-veer voor de juiste functionaliteit en energieruggave voor uw patiënt;
- ✓ Pas met de shimkit de uitlijning aan in voetplaat en manchet;
- ✓ Eenvoudig externe-, interne-, plantaire- en dorsiflexie-aanpassingen mogelijk.



Voorkomt
klapvoet




Voorkomt
vallen



Stabiliseert
het lopen



Vermindert
contracturen

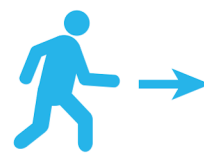

Zorgt voor
energieteruggave



Verbeterst de
kwaliteit van leven

Indicaties

Zenuw/spierstoornis onder de knie | Letsel aan- of verlies van zacht weefsel | Verlies van dorsale of plantaire flexie | Guillain-Barré syndroom | CVA | Spina Bifida | Rugletsel | MS | Charcot Marie Tooth | CP | Polio | Patiënten die weer recreatief willen sporten



Let op

- De veren kunnen niet worden verwarmd;
- De veren zijn niet ontworpen voor offloading (ontlasting) van het gewicht van de patiënt;
- De veren kunnen worden gebruikt in combinatie met thermoplastische materialen en composieten;
- Alle informatie vindt u terug op onze website: www.orthopartners.eu

Orthopartners garandeert dat de PDE-producten vrij zijn van fabricage- of fabrieksfouten gedurende 6 maanden vanaf de datum van aankoop. De garantie heeft geen betrekking op defecten die worden veroorzaakt door een verkeerde toepassing, aangepaste fabricage op specificatie van de klant, onjuiste opslag, of opzettelijk misbruik of het gebruik van een brace buiten de oorspronkelijke opgegeven ontwerpparameters.